

Инструкция по установке Программного обеспечения «Нанофор 05. Программа для управления генетическим анализатором «Нанофор 05»

Для установки ПО «Нанофор 05. Программа для управления генетическим анализатором «Нанофор 05» запустите файл «Nanofor05Setup.exe» из дистрибутива программы. Далее следуйте инструкции программы установки. Рекомендуется устанавливать программу с предложенными параметрами, для этого нажимайте кнопку «Далее». Если Вы хотите изменить папку, в которую будет установлено ПО «Нанофор 05. Программа для управления генетическим анализатором «Нанофор 05», нажмите клавишу «Обзор» и выберите другое расположение (рис. 1).

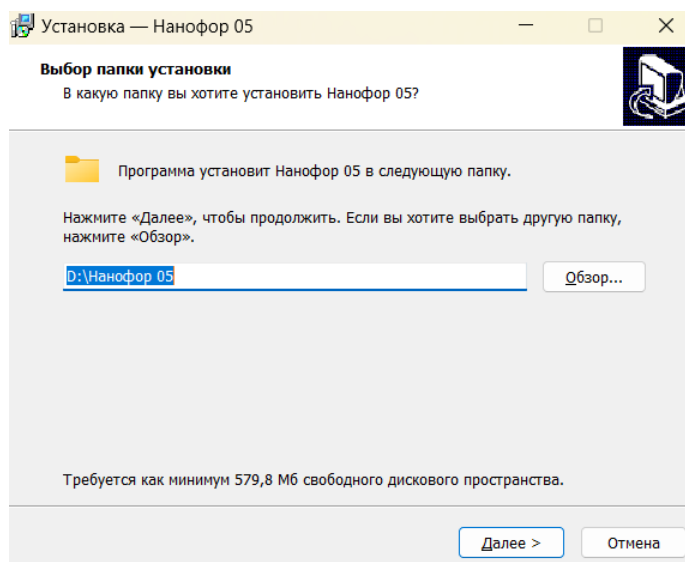


Рис.1. Выбор папки для установки программы

На следующем этапе можно выбрать расположение ярлыков для запуска компонентов программ в меню "Пуск" (рис. 2)

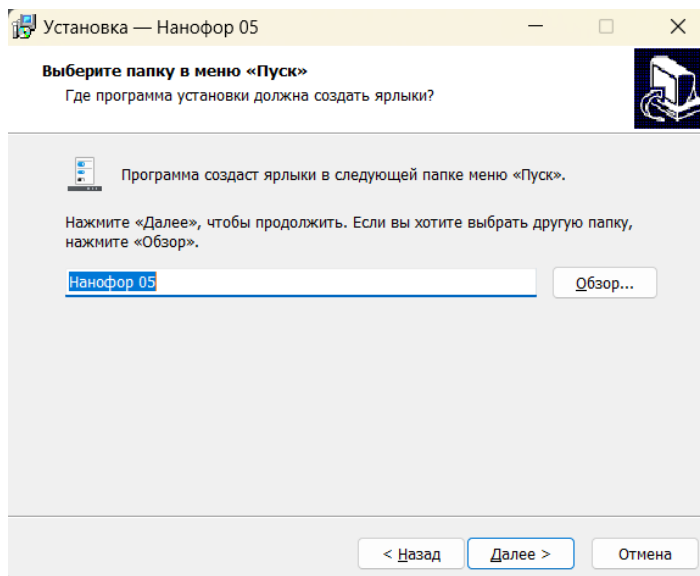


Рис.2. Выбор папки для ярлыков программы в меню "Пуск"

После установки параметров нажмите кнопку «Установить», подождите, пока программа установки завершит работу (на все последующие вопросы установщика необходимо отвечать положительно), и перезагрузите компьютер.